

Labo Gas Regulator

Qualität – Made in Germany



Für zwei unterschiedlich
einstellbare
Gasausgangsdrücke aus einer
Gasversorgung

Technische Daten:

- Außenmaße 191 x 88 x 208 mm
(B x T x H)
- Gewicht 2,2 kg
- Gas-Eingangsdruck: max. 3,0 bar
- Gas-Ausgangsdruck: 0 – 2,5 bar
- Gase: CO₂, N₂
- Wandanbringung möglich (rückseitige
Öffnung)

REF 15971

Merkmale:

- Notwendig für schwankungsarmen Betrieb
des Labo Gas Mixers (kontinuierliche
Gasentnahme) bei gleichzeitiger
Gasversorgung von CO₂-Inkubatoren
(gepulste Gasentnahme) aus derselben
Quelle
- Geeignet für Gasversorgung aus
Gasflaschen mit Druckminderer oder
Hausgasversorgung
- Für verschiedenste Anwendungen, bei
denen unterschiedliche Drücke an einer
Gasversorgung realisiert werden sollen

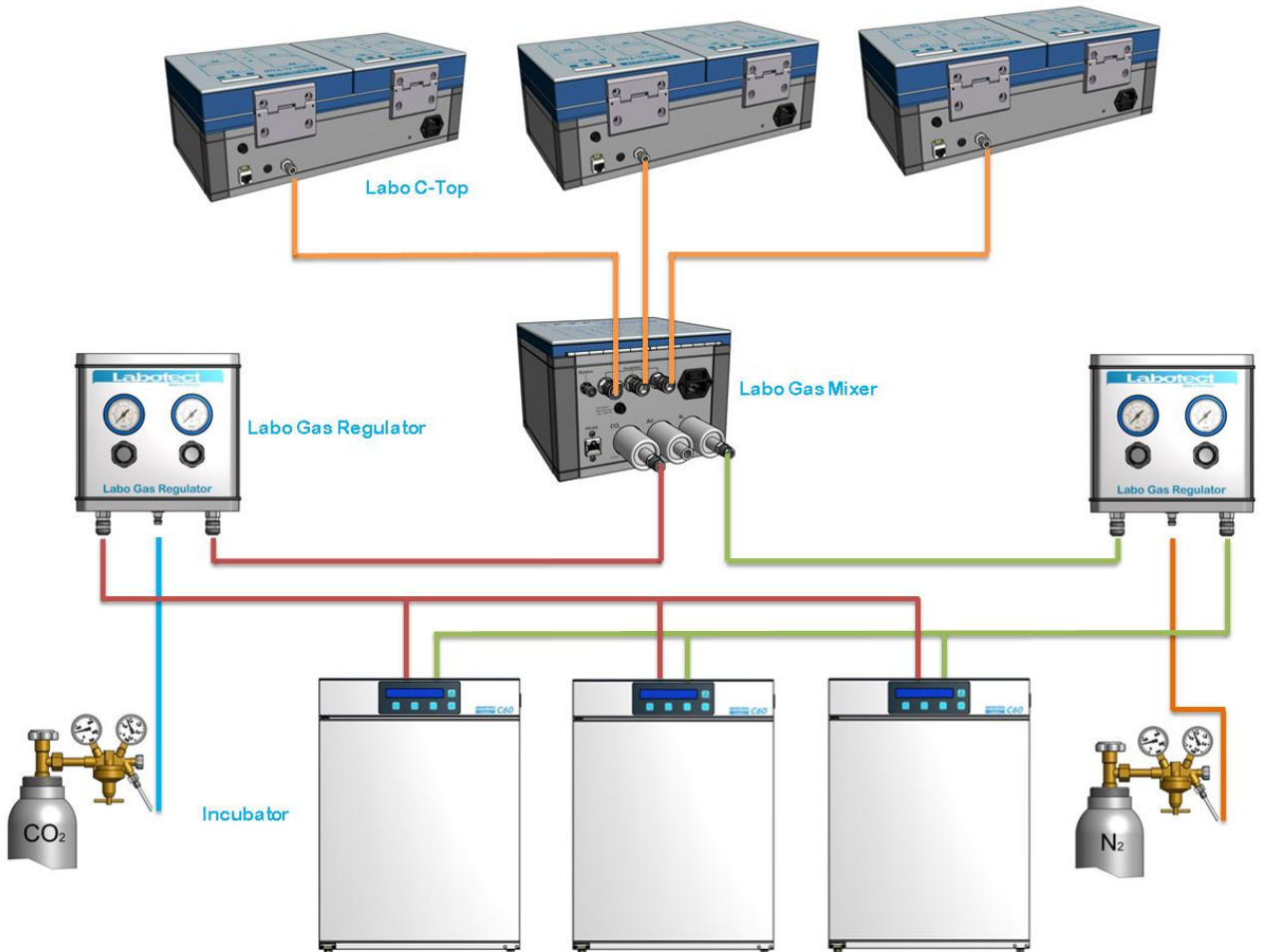


Abbildung: Anwendungsbeispiel Labo Gas Regulator mit Labo Gas Mixer, 3 x Labo C-Top und 3 x C60-Inkubatoren